

AI GLASSES BRASIL · META + CEIA

“Esta caneta pode mudar um tratamento.
Mas não responde: o que eu escolho comer
agora?”

A decisão acontece longe da consulta.

O tratamento acontece por meses.
A decisão alimentar, várias vezes por dia.

CLAREZA · MATURIDADE · EXECUÇÃO



Orientação não é execução.

O problema é transformar orientação individual em decisão contextual, no exato momento da escolha.



SINAIS RECORRENTES

- dúvida na compra ou pedido
- desconforto após refeições
- **qualidade alimentar e massa magra**

VALIDAÇÃO DIVERSA

entrevistas
exploratórias

Nenhuma quantidade de entrevistas é declarada sem documentação.

literatura clínica

ANVISA

bases alimentares

Olhar. Perguntar. Decidir.

“Posso consumir isso?”

Contexto individual



EVITAR DERIVADOS DE LEITE



INCOMPATÍVEL


“Incompatível com seu perfil.
O rótulo declara leite.”



A fonte mais relevante vence a comunicação frontal.

Não é câmera → IA → resposta.

A IA percebe. A decisão crítica é determinística e auditável.

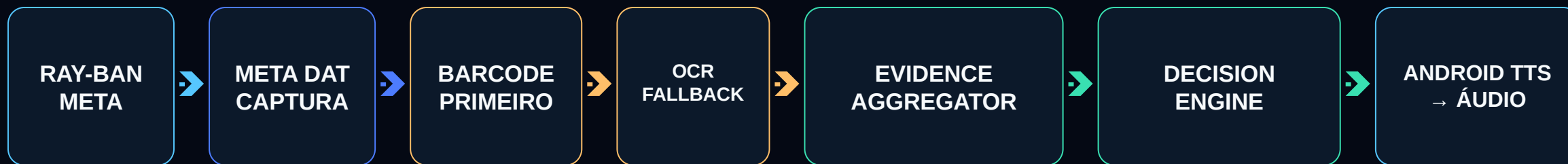

PERCEPÇÃO LOCAL

ML Kit Barcode Scanning

ML Kit Text Recognition / OCR

Image Labeling + STT local, quando aplicável

DECISÃO COM PROVENIÊNCIA

origem · tipo · confiança · versão/modelo

perfil · restrições · plano · histórico

4 estados explícitos; nenhuma falsa precisão

DataStore + histórico local

LOCAL-FIRST · FRAME SOB DEMANDA · SEM UPLOAD NO CAMINHO CRÍTICO

Não saber também é uma resposta.

A fonte muda o peso. A falta de evidência muda o estado.


1 RÓTULO DECLARADO

2 BASE POR EAN

3 CONFIRMAÇÃO

4 OCR BRUTO

5 INFERÊNCIA
VISUAL

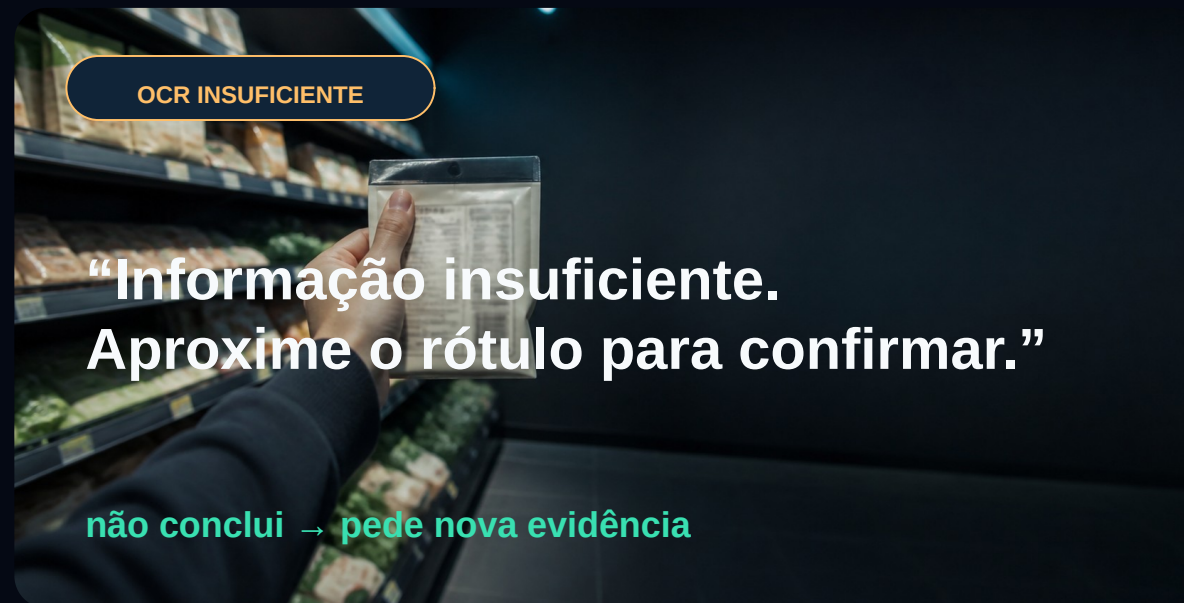

COMPATÍVEL

INCOMPATÍVEL

PRECISA DE
CONFIRMAÇÃO

INFORMAÇÃO
INSUFICIENTE

Falta de evidência nunca vira falsa precisão.

Já existe implementação.

O que está pronto é diferente do que ainda precisa ser validado.

01

VALIDAMOS O PROBLEMA

Entrevistas exploratórias
+ ciência + regulação
+ bases alimentares

02

CONSTRUÍMOS O NÚCLEO

Android nativo + DAT
Barcode + OCR local
Decision Engine + histórico

03

PROVAMOS EXECUÇÃO

Testes automatizados
Instrumentação de latência
Contagens não revalidadas

04

PRÓXIMOS PASSOS

Ray-Ban físico + métricas
Validação profissional
Pilotos com usuários e
clínicas

PARCEIROS PARA A PRÓXIMA ETAPA

nutricionistas

clínicas

programas GLP-1

instituições de pesquisa

Não declaramos latência, bateria, precisão, usuários ou validação clínica sem medição.

A alimentação acontece no mundo real.

CELULAR

pegar → desbloquear → abrir → enquadrar → consultar

RAY-BAN META

OLHAR → PERGUNTAR → OUVIR

hands-free · primeira pessoa · resposta por áudio

B2C → CLÍNICAS → ECOSSISTEMA GLP-1

Começamos com um público e uma dor específicos.
A arquitetura evolui para outras restrições e planos.

Inteligência no momento da escolha.